

目的に応じて、またプライバシーに配慮して、
保存する映像のサイズ・画質を選べます。

サイズ3段階／画質3段階

画質：高 [圧縮率50]



解像度 320×240pixel



解像度 640×480pixel



解像度 1280×960pixel

画質：中 [圧縮率75]



解像度 320×240pixel



解像度 640×480pixel



解像度 1280×960pixel

画質：低 [圧縮率100]



解像度 320×240pixel



解像度 640×480pixel



解像度 1280×960pixel

赤外線撮影

●掲載した画像は「画質：中 [圧縮率75]」のもので、
その他の画質設定も可能です。



解像度 320×240pixel



解像度 640×480pixel



解像度 1280×960pixel

パラマウントベッド株式会社

ホームページURL www.paramount.co.jp

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区即町2丁目3番地の3
 さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号
 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴川5丁目3番33号
 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区奥1丁目20番17号
 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号
 高松営業所 〒761-8031 高松市瑞穂町223番1
 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号

☎03(3648)1111(代)
 ☎03(3648)1171(代)
 ☎011(271)1181(代)
 ☎022(239)5211(代)
 ☎048(852)0707(代)
 ☎042(795)8800(代)
 ☎052(963)0600(代)
 ☎06(644)8791(代)
 ☎087(831)8900(代)
 ☎082(293)1311(代)
 ☎092(461)1131(代)

製品のお求め、ご相談は……



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ●カメラログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

C20-C00660



as human, for human
PARAMOUNT BED



眠りSCANに“eye”を加えて、
訪室判断をよりの確に。



眠りSCAN連動カメラシステム

眠りSCAN
eye



パラマウントベッド株式会社

利用者さまの様子が見えるから、 より適切な対応が可能になります。

「眠りSCAN*1」がベッド上の利用者さまをモニタリング。利用者さまの状態(覚醒・起き上がり・離床)が変わったときや、呼吸数・心拍数が設定値になったときに、従来の通知に加えて利用者さまの様子を映像で知らせます。例えば「起き上がり」に通知を設定しておけば、起きあがりを検知したときの映像が直ちにパソコンや携帯端末に表示されます。もちろん、必要な時にはワンタッチで利用者さまの様子を見られるほか、常時レコーダー機能で最大3日まで映像が保存されます。



通知設定していないときでも「眠りSCAN Viewer (Ver.1.6.0.0以降)」または「眠りSCANアプリ」のカメラアイコンをクリックすれば、いつでも利用者さまの様子を見ることができます。




室内の明るさに応じて通常撮影と赤外線撮影とが自動的に切り替わります。赤外線撮影では、夜間の消灯した暗い室内でも利用者さまの様子を見ることができます。



常時レコーダー機能では、最大過去3日分の利用者さまの映像を記録*2できます。

「眠りSCAN Viewer」の通知設定(覚醒/起き上がり/離床/呼吸検知/心拍検知)に連動し、通知前後の映像を最大1年分まで記録*2*3できます。

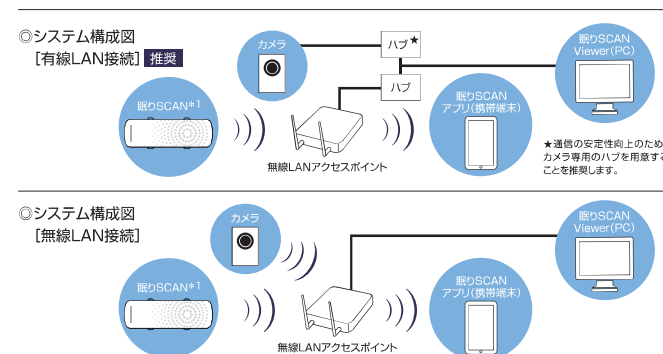

眠りSCAN eye 対応カメラ

【型番】PoE AXIS M1065L:オープン価格 / Wi-Fi AXIS 1065LW:オープン価格【サイズ】106mmx60mmx37mm【重量】134g ◎三脚ネジ(カメラネジ1/4インチ)に対応、さまざまな市販カメラ固定器具が利用でき、用途に合わせた場所に設置できます。

*1:販売名「眠りSCAN(NN-1120)」一般医療機器 届出番号12B1X0020000125、販売名「眠りSCAN(NN-1520)」一般医療機器 届出番号12B1X0020000126
 *2:撮影される映像は、静止画を設定した間隔で送信するものです。映像の記録方法は1秒間隔から5秒間隔の間で設定できます。
 *3:ハードディスクの容量や利用者さまの人数、設定により、映像を保存できる日数が制限される場合があります。

●映像を記録する場合は、記録専用のストレージ(外付けハードディスクなど)をご用意いただく必要があります。詳しくは当社営業担当にお問い合わせください。
 ●カメラを無線LANで接続してご利用になる場合は、事前にネットワークの確認が必要となります。●カメラを無線LANで接続すると、使用環境によって接続できるカメラの台数に制限がある場合があります。